

DH-Pro[®]

安心・安全の最大モード 600mL/min



論より証拠 論より結果

DH-Pro[®] とは

DH-Proは、水素生成吐出口が2口となっていますので様々な使い方ができます。

使用モードも様々で

2口吐出口に吸入チューブを付ければ、最大モード600mL/min

1口吐出口に吸入チューブを付ければ、最大モード300mL/min


ナイトモードでは100mL/minの最大水素生成量となっています。

眼と鼻で吸入

二人で吸入

二人でゴーグルで吸入

ナイトモード

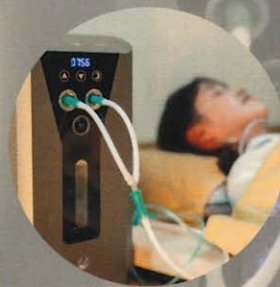

DH-Pro[®] の特徴

吸入するガスの種類を選択可能 長時間吸入する時や、吸入して呼吸が苦しい時は、水素酸素混合ガスでも吸入可能。

水素ガス
吸入モード



水素・酸素混合ガス
吸入モード




オプションのアダプタを使用すれば、最大同時に8名まで吸入可能

家族みんなでペットも含め同時に吸入

クラブ活動で部員8名同時吸入が可能

鼻用チューブとゴーグル同時に4名吸入可能

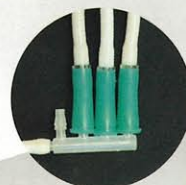

DH-Pro[®] 分析結果報告書 (第三者機関: 一般社団法人 生体ガス療法評価機関)

2023年9月25日

分析結果報告書

WOO株式会社 様

事業者名 一般社団法人 生体ガス療法評価機関
大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目2番7号
東栄ビル2階

試料名	DH-Pro	気温/湿度	25°C/67%
採取日	2023年9月22日	気圧	1011hpa
採取場所	(社)生体ガス療法評価機関	天候	晴れ
採取者	増田 順亮	採取時刻	-
試料量	1mlを15秒かけて採取	試料採取方法	マイクロシリンジ

分析の対象	分析結果	単位	分析方法
DH-Pro直接採取	999,176 (99.9)	ppm v/v (%)	ガスクロマトグラフ(GC)法
DH-Pro吸入チューブ 出口採取	998,738 (99.9)	ppm v/v (%)	ガスクロマトグラフ(GC)法
鼻腔内濃度	854,996 (85.5)	ppm v/v (%)	ガスクロマトグラフ(GC)法
以下余白			

備考: DH-Proに吸入チューブを接続して普通呼吸する(鼻で吸気、口で呼気)

ガスクロマトグラフ (GC) 法

◎直接採取 水素濃度

99.9% 999,176ppm v/v

◎吸入チューブ出口採取 水素濃度

99.9% 998,738ppm v/v

◎鼻腔内 水素濃度

85.5% 854,996ppm v/v

2023年9月25日

分析結果報告書

WOO株式会社 様

事業者名 一般社団法人 生体ガス療法評価機関
大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目2番7号
東栄ビル2階

試料名	DH-Pro	気温/湿度	25°C/67%
採取日	2023年9月22日	気圧	1011hpa
採取場所	(社)生体ガス療法評価機関	天候	晴れ
採取者	増田 順亮	採取時刻	-
試料量		試料採取方法	マイクロシリンジ

分析の対象	分析結果	単位	分析方法
DH-Pro 吐出ガス量 600mL	620.0	mL/min	水上置換法
DH-Pro 吐出ガス量 600mL	右 310 左 310	mL/min	水上置換法
DH-Pro 吐出ガス量 300mL	310	mL/min	水上置換法
DH-Pro 吐出ガス量 300mL	右 155 左 155	mL/min	水上置換法
DH-Pro 吐出ガス量 100mL	110	mL/min	水上置換法
DH-Pro 吐出ガス量 100mL	右 55 左 55	mL/min	水上置換法

備考:

水上置換法

◎吐出ガス量 600mL

620mL/min

◎吐出ガス量 600mL

右 310・左 310mL/min

◎吐出ガス量 300mL

310mL/min

◎吐出ガス量 300mL

右 155・左 155mL/min

◎吐出ガス量 100mL

110mL/min

◎吐出ガス量 100mL

右 55・左 55mL/min

● 製品仕様

項目	仕様規格
製品名	加熱式ネブライザ DH-Pro®
型式	DH600-P
水素生成量	最大 600mL/ min
酸素生成量	最大 300mL/ min
定格消費電力	350W
水素濃度	99.9%
生成ガス最大圧力	0.5Mpa
電解方式	加熱式ネブライザ
定格電圧	AC100V - AC240V 50/60Hz
製品寸法	W265mm × D245mm × H380mm / 重量 8.3kg
使用する水	精製水 または 蒸留水 ※1
医療機器許可番号	27B2X90003000007
付属品	吸入チューブ + チューブ付きチャンバー 3 セット Y 字型チューブ 2本 排水用チューブ (2m) 1本 注水口キャップ 1個 注水用ロート 1個 ドクター水素メガネ 2個 精製水 3本 電源ケーブル 1本 取扱説明書 1冊
価格	1,100,000 円 (税込)

※ 1 逆浸透 (RO) 膜処理済 + イオン交換膜処理済の蒸留水をお使いください。
詳細は認定代理店までお問い合わせください。