

肌の年齢測定器

肌年齢計

肌の老化を促進する5大要素は、紫外線、乾燥、加齢、食生活、ライフスタイルです。
肌の健康を考えた生活習慣をされていますか？

あなたの肌は大丈夫ですか？

- 肌の年齢が分かります。
- 手軽で簡単に、約40秒で測定ができます。



Live Aid Co.,Ltd.
<http://www.live-aid.co.jp>

肌年齢計

■機器構成




消耗品



感熱ロール紙

測定原理

電極に頬と手のひらを接触させ、その間の表皮と真皮の皮膚インピーダンスを測定し、肌の年齢、健康度を算出します。

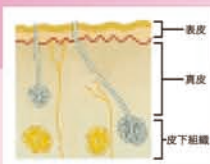

■特徴

- 肌年齢、肌健康度(A~E)、ワンポイントアドバイスの表示。
- 測定時間は40秒。
- タッチパネルモニターで簡単に操作ができます。
- 卓上サイズで、わずか5.5kgの軽量設計。

■仕様

- 測定部位：頬、手のひら
- 表示内容：肌年齢、肌健康度(A~E)、ワンポイントアドバイス
- 測定時間：温度10~35(°C)
- 電源：AC100V 50/60Hz
- 寸法：W280×D305×H305(mm)
- 重量：5.5(kg)


※コイン仕様もオプションでご用意できます。
 ※商品のデザイン、仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承下さい。
 ※印刷物と実際では多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承下さい。
 ※このカタログの記載内容は2013年8月現在のものです。

製造元:

有限会社 ライブエイド

〒920-3114 石川県金沢市吉原町ホ47番地
 TEL 076-257-2221 FAX 076-257-3738
 URL <http://www.live-aid.co.jp>
info@live-aid.co.jp

印刷結果

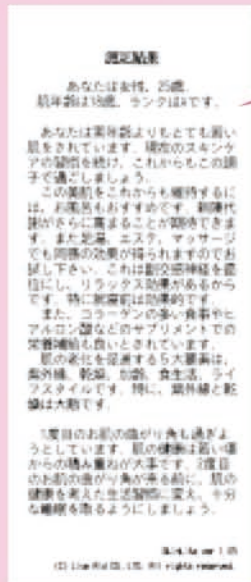

肌年齢
肌健康度

肌健康度

- A：とても若い肌です。
- B：やや若い肌です。
- C：標準的な肌の状態です。
- D：やや肌が老化しています。
- E：肌が老化しています。

●納入先のご提案●

エステサロン、リラクゼーションルーム、温浴施設
 フィットネスクラブ、薬局店頭、アミューズメント施設
 公共施設など

販売店: